

Patient Handbook

(Guide du patient)

Continuous Diffusion of Oxygen Therapy

(Diffusion continue d'oxygénothérapie)



Table of Contents

The EO₂[®] System

Device..... 3

Dressings..... 4

Tubing..... 5

Setup..... 6

Dressing Changes..... 7

Charging..... 8

Accessories

Carrying Case..... 9

Humidicant Pack..... 10

Alarms/Warnings..... 11

Tips for Success..... 12

Table des matières

Le système EO₂[®]

Appareil..... 17

Pansements..... 18

Tuyau..... 19

Installation..... 20

Changements de pansement..... 21

Charge..... 22

Accessoires

Étui de transport..... 23

Poche humidifiante..... 24

Alarmes/Avertissements..... 25


Conseils utiles..... 26

Your EO₂ Device

In order to speed up the healing process, your EO₂ Device will deliver oxygen to your wound.

- **Wearable 24/7**
- **Portable**
- **Silent & Discreet**

The Flow Rate will be set by your healthcare provider.

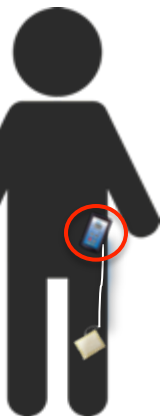

Your Dressing

The OxySpur® Dressing is connected to the EO₂ Device to deliver the oxygen to your wound.

- **Super absorbent**
- **Comes off easy**
- **Gentle on skin**

Comes in
Adhesive &
Non Adhesive



Your Tubing

The Extension Set (tubing) carries the oxygen from the EO2 Device to the dressing.


- **Easy to connect**

Tip for Success:

Place tubing under clothing to avoid snagging it on objects.



Feed the tubing up the bottom of the pant leg and out through the waist band, and then connect it to the EO2 Device.

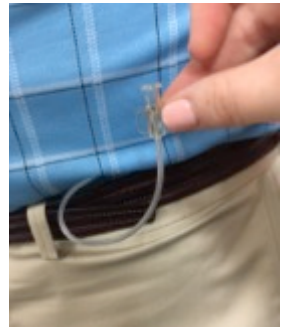

Extension Set
(tubing)

System Set Up


Connect your tubing to both the EO₂ Device and the OxySpur Dressing.

- 1) Connect the tubing to the EO₂ Device by twisting it onto the port marked "O₂" until snug.



- 2) Connect the other side of the tubing to the dressing by twisting it until snug.

DO NOT tighten the tubing too tightly.

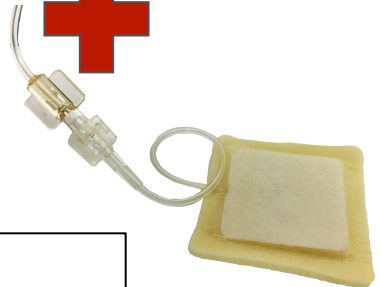

Dressing Changes

Change your dressing once a week unless instructed otherwise by your healthcare provider.


Applying the Dressing

1) Remove the dressing from the package.



2) **For adhesive dressings only**

Peel off the paper backing surrounding the dressing border, just like a BAND-AID®.

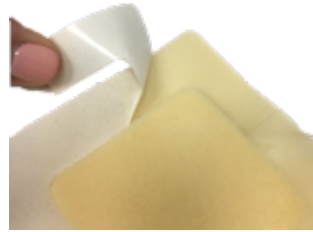

3) Place the dressing over the wound, foam side down, and secure it to the skin.



Tips:

- Your healthcare provider will provide you with details on how to secure your non-adhesive dressing.
- Don't worry about having an air tight seal on the dressing.
- Allow slack when securing the tubing to prevent it from pulling out of the dressing.



Charging

When the battery on your EO2 Device runs low, plug the device into the charger until it is fully charged.




***DO NOT turn your device off when charging.
Doing so will interrupt your therapy and slow down healing.***


- 1) Plug the charger into the “BAT” port on the top of the EO2 Device.




- 2) Plug the head of the power cord into the charger.

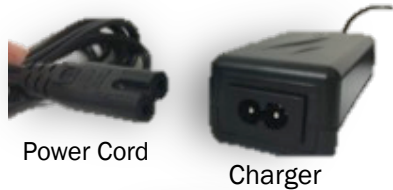

- 3) Plug the end of the power cord into an outlet.

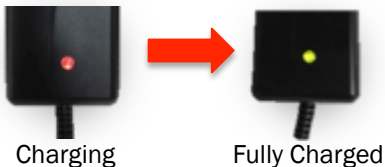

Unplug your device when it is **fully** charged:
When the red light on the charger changes from **red** to **green**.

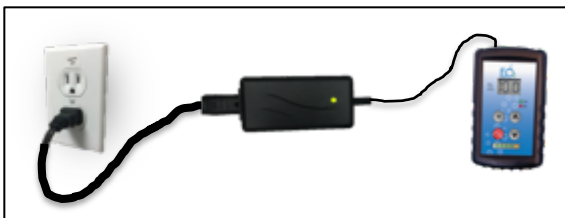

TIP: Most patients find it easier to charge the EO2 Device overnight, like a cellphone.

Device Accessories

Carrying Case

Use the Carrying Case to make it easier to take your EO2 Device with you.

- 1) Hook the Strap onto the Carrying Case.



- 2) Unzip the Carrying Case.



- 3) Place your EO2 Device inside the Carrying Case face down and zip the case closed.



- 4) Turn over the Carrying Case and lift the Velcro top in order to see the device.



Device Accessories


Humidicant Pack

The EO₂ Device needs a humid environment.
The Humidicant Pack can be used to add moisture to your EO₂ Device, as needed.

Your healthcare provider will instruct you on when to use the Humidicant Pack.

- 1) Tear open and remove the outside package from the Humidicant Pack.

The inside pack should feel moist.

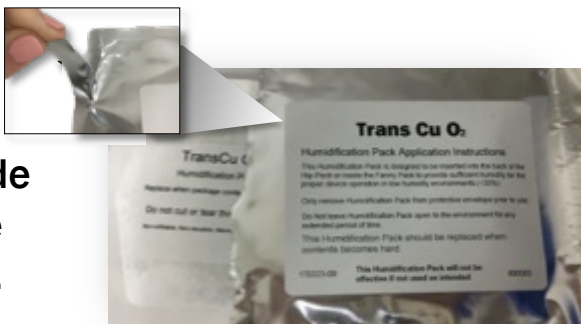

- 2) Place the Humidicant Pack next to the device, inside the Carrying Case, and zip the case closed



Replace the Humidicant Pack when it is dry or feels “crunchy”

Alarms/Warnings

Beep for Low Battery

Your EO2 Device will beep when the battery is low.



Beep for Blockage

Your EO2 Device will beep if there is a blockage.
Press the MUTE Button to make the beep stop.



If an alarm continues, call your healthcare provider or:

1.800.825.2979

*For troubleshooting please consult the
Instructions For Use or go to eo2.com*

Tips for Success



Wear your device all the time (24/7)



DO NOT get the EO₂ Device wet

Only disconnect the EO₂ Device for bathing. When bathing, disconnect the tubing from the dressing and be sure to protect your dressing from getting wet.



Never turn your device off

Always leave your EO₂ Device on. Even when you disconnect it for bathing or charging.



DO NOT PEEK

Do not take off or adjust your dressing between dressing changes. Doing so will interrupt your therapy and slow down healing.

Find more details
and tutorials at:

eo2.com



Notes

Guide du patient

Diffusion continue d'oxygénothérapie



Table des matières

Le système EO₂[®]

Appareil..... 17

Pansements..... 18

Tuyau..... 19

Installation..... 20

Changements de pansement..... 21

Charge..... 22

Accessoires

Étui de transport..... 23

Poche humidifiante..... 24

Alarmes/Avertissements..... 25

Conseils utiles..... 26

Votre appareil EO₂

Afin d'accélérer le processus de guérison, votre appareil EO₂ fournira de l'oxygène à votre blessure.

- **Portable 24h/7j**
- **Transportable**
- **Silencieux et discret**

Le débit sera défini par votre fournisseur de soins de santé.



Votre pansement

Le pansement OxySpur® est raccordé à l'appareil EO2 pour fournir de l'oxygène à votre blessure.

- **Super absorbant**
- **Se détache facilement**
- **Doux pour la peau**

Disponible en
adhésif et
non adhésif



Votre tuyau


L'ensemble de rallonge transporte l'oxygène de l'appareil EO₂ au pansement.

- **Facile à raccorder**

Conseils utiles :

Placez le tuyau sous le vêtement pour éviter de l'accrocher à des objets.

Passez le tuyau au bas de la jambe de pantalon et à travers la taille, puis raccordez-le à l'appareil EO₂.

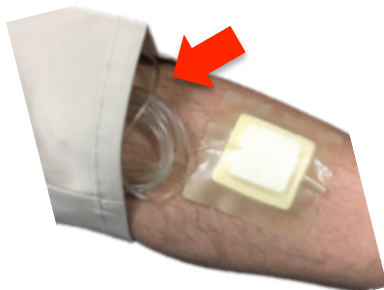

Ensemble de
rallonge (tuyau)

Installation du système


Raccordez votre tuyau à la fois
à l'appareil EO2 et au pansement OxySpur.

- 1) Raccordez le tuyau
à l'appareil EO2 en
le tordant sur le port
marqué « O2 » jusqu'à
ce qu'il soit bien serré.



- 2) Raccordez l'autre extrémité
du tuyau au pansement
en le tordant jusqu'à ce
qu'il soit bien serré.

**Ne serrez PAS le tuyau
trop fermement.**

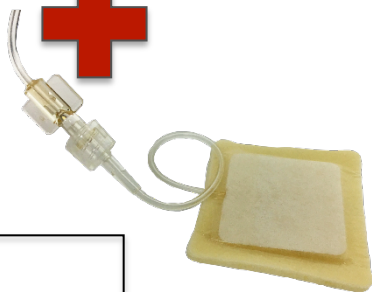

Changements de pansement

Changez votre pansement une fois par semaine, sauf instruction contraire de votre fournisseur de soins de santé.

Application du pansement

1) Retirez le pansement de l'emballage.



2) **Pour les pansements adhésifs seulement**

Retirez le papier collant entourant le bord du pansement, comme pour un BAND-AID®.



3) Placez le pansement sur la blessure, avec la mousse en dessous, et fixez-le à la peau.



Conseils :

- Votre fournisseur de soins de santé vous fournira des détails sur la manière de fixer votre pansement non adhésif.
- Ne vous souciez pas d'avoir un joint hermétique sur le pansement.
- Laissez du jeu lorsque vous fixez le tuyau pour éviter de le retirer du pansement.



En charge

Lorsque la batterie de votre appareil E02 fonctionne lentement, branchez l'appareil au chargeur jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé.

Charge complète



Charge faible

N'éteignez PAS votre appareil lorsqu'il est en charge.

Si vous le faites, cela interrompra votre traitement et ralentira votre guérison.

- 1) Branchez le chargeur au port « BAT » situé sur l'appareil E02.



- 2) Branchez la tête du cordon d'alimentation au chargeur.



Cordon d'alimentation

Chargeur

- 3) Branchez l'extrémité du cordon d'alimentation à une prise.



En charge



Complètement chargé

Débranchez votre appareil lorsqu'il est *complètement* chargé : Lorsque le voyant rouge sur le chargeur passe de **rouge** à **vert**.



CONSEIL : La plupart des patients pensent qu'il est plus facile de charger l'appareil E02 la nuit, comme un téléphone cellulaire.

Accessoires de l'appareil

Étui de transport

Utilisez l'étui de transport pour qu'il vous soit plus facile d'emporter votre appareil EO2 avec vous.

- 1) Accrochez la sangle sur l'étui de transport.



- 2) Ouvrez l'étui de transport.



- 3) Placez votre appareil EO2 à l'intérieur de l'étui de transport face vers le bas et fermez l'étui.



- 4) Retournez l'étui de transport et tirez sur le haut de la fermeture adhésive afin de voir l'appareil.



Accessoires de l'appareil

Poche humidifiante


L'appareil E02 requiert un environnement humide.

La poche humidifiante peut être utilisée pour apporter de l'humidité supplémentaire à votre appareil E02, le cas échéant.

Votre fournisseur de soins de santé vous indiquera comment utiliser la poche humidifiante.



- 1) Déchirez l'ensemble et retirez l'emballage extérieur de la poche humidifiante.**
L'intérieur de la poche doit sembler humide.

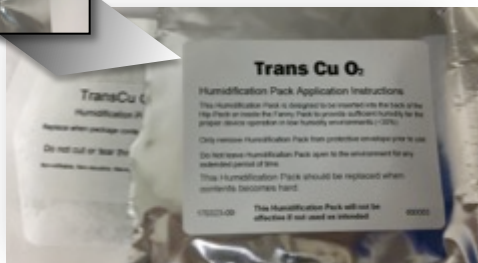

- 2) Placez la poche humidifiante à côté de l'appareil, à l'intérieur de l'étui de transport, et fermez l'étui**



Remplacez la poche humidifiante lorsqu'elle est sèche ou semble « croquante » au toucher

Alarmes/Avertissements

Signal sonore de batterie faible

Votre appareil EO2 émettra un signal sonore si la batterie est faible.

Charge complète



Charge faible

Signal sonore de blocage

Votre appareil EO2 émettra un signal sonore en cas de blocage. Appuyez sur la touche de discrétion pour arrêter le signal sonore.



Si une alarme persiste, appelez votre fournisseur de soins de santé ou :

1.800.825.2979

En cas de problème, veuillez consulter le Mode d'emploi ou aller sur eo2.com

Conseils utiles



Portez votre appareil tout le temps (24h/7j)



Ne mouillez PAS l'appareil EO2

Débranchez uniquement l'appareil EO2 pour le bain. Lorsque vous prenez un bain, débranchez le tuyau du pansement et assurez-vous de ne pas mouiller votre pansement.



N'éteignez jamais votre appareil

Laissez toujours votre appareil EO2 allumé. Même lorsque vous le débranchez pour prendre un bain ou le charger.



NE JETEZ PAS UN COUP D'ŒIL

Ne retirez ou n'ajustez pas votre pansement entre les changements de pansement. Si vous le faites, cela interrompra votre traitement et ralentira votre rétablissement.

Trouvez plus de renseignements et des tutoriels à l'adresse :

eo2.com



Remarques

EO₂ Concepts
12500 Network Blvd
Suite 310
San Antonio, TX 78249

1.800.825.2979



www.eo2.com

